


# Aqua Lift Peeling

アクアリフトピーリング  
保証書付き 取扱説明書

## 目次

|                |         |
|----------------|---------|
| 安全上のご注意        | 01 ~ 05 |
| 内容物と各部名称       | 06      |
| ご使用前の前にお読みください | 07 ~ 08 |
| ご使用方法          | 09 ~ 11 |
| お手入れ方法         | 12      |
| よくある質問と答え      | 13      |
| 故障かな？と思ったら     | 14      |
| 製品仕様           | 14      |
| アフターサービス       | 15      |
| 修理・交換について      | 15      |
| 保証規定           | 16      |

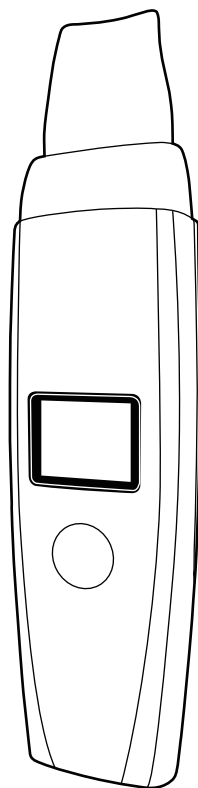

お買い上げありがとうございました。

ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用ください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管して下さい。



ご使用の前に必ずお読みください

#### W Lift (Wリフト) モード使用上のご注意

- アクセサリー（指輪・イヤリング・ネックレス等）は必ず外した状態でご使用ください
- 初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1からご使用ください
- 本体のサイドプレート（取扱説明書 P7 参照）を、必ず握ってご使用ください
- 本体のサイドプレートから、持ち手にも刺激を感じますが、商品の異常ではございません

# 安全上のご注意

- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、説明書通りにお使いください。
- 注意事項は下記のように区分しています。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。



## 危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、リスクの度合いが高いと想定される内容を示します。



## 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う危険性が想定される内容を示します。



## 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの可能性がある内容を示します。



左の記号は、「使用してはいけない」状態をお知らせするものです。



左の記号は、「必ず行わなければならない」内容をお知らせするものです。



## 危険



### 禁止

下記のような医用電気機器を使用中の方は、使用しないでください。  
誤作動を招く恐れがあります。

- ペースメーカー等の体内植込み型医用電気機器
- 心電計等の装着型医用電気機器



## 警告



### 使用前に 相談

次の方はかかりつけの医師に相談の上、ご使用ください。  
事故やけがの恐れがあります。

- アトピー性皮膚炎の方
- アレルギー体質の方
- 特に肌が敏感な方
- ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている方
- 心臓に障害のある方
- 急性（疼痛性）疾患の方
- 悪性腫瘍のある方
- 顔面神経痛の方
- 妊娠中の方
- 生理中の方
- 有熱性疾患の方
- 血圧異常の方
- 感染性疾患のある方
- 結核症疾患の方
- 血友病疾患の方
- 歯の治療中の方
- 飲酒している場合や薬を服用中の場合、疲労が著しい場合
- 日焼けをしている方

# 警告



禁止

下記の部位には使用しないでください。

事故やけがの恐れがあります。

- 目や耳のまわり ●眼球及び上まぶた ●傷口 ●顔面黒皮症の部分
- 口の中等粘膜の部分 ●ニキビや吹出物で炎症を起こしている部分
- 化粧品などで皮ふ炎を起こしている部分
- 痛覚、知覚障害を起こしている部分
- 整形手術をした部分
- 皮ふの下に金属・プラスチック・シリコン等を埋め込んである部分
- カユミやほてり、物理的刺激などによる病的なシミのある部分

取扱説明書に記載されている以外の用途や方法では使用しないでください。

事故やトラブル、故障の恐れがあります。

付属の AC アダプタは交流 100 ～ 240 V 以外の電源では使用しないでください。

火災や感電の恐れがあります。

長時間の使用や誤使用により、充電ケーブルが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使用を中止してください。

- 充電ケーブルがねじれて戻らなくなった時。
  - 充電ケーブル・AC アダプターの根元が破損、変形している時。
- 充電ケーブルが断線すると火花が発生して、やけどや感電の恐れがあります。

充電ケーブルに下記の行為を行わないでください。

- 無理に曲げない ●ねじらない ●引っ張らない ●ケーブルの上に重いものをのせない ●高温の物に近づけない ●束ねない
- はさみ込まない ●加工しない

火災・感電の恐れがあります。

AC アダプターに充電ケーブルを巻き付けしないでください。

充電ケーブルが断線し火災や感電、やけどの恐れがあります。

子どもには使わせしないでください。

乳幼児の手の届くところで使用・保管をしないでください。

事故やけがの恐れがあります。

乳幼児や子ども・ペットに使わないでください。

事故やけがの恐れがあります。



# 警告

|                                                                                                    |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>禁止</b>     | <p>肌に傷や炎症がある場合は絶対に使用しないでください。<br/>肌トラブルや痛みの原因になります。</p>                                               |
| <br><b>必ず守る</b>   | <p>本体に水がついた後は、必ずタオル等で拭き取り風通しのよい日陰でよく乾燥させてください。<br/>なお、本体は水やお湯などの中につけないでください。<br/>故障やショートの原因になります。</p> |
| <br><b>ぬれ手禁止</b>  | <p>ぬれた手で AC アダプターや充電ケーブルに触れないでください。<br/>故障・感電・ショートの原因になります。</p>                                       |
| <br><b>必ず守る</b>   | <p>本体の充電が完了したら速やかに充電ケーブルを充電台から外してください。<br/>火災・感電の恐れがあります。</p>                                         |
|                                                                                                    | <p>本体に異音や異常が発生した時は直ちに使用を中止してください。<br/>事故・けがの恐れがあります。</p>                                              |
|                                                                                                    | <p>使用時間や使用頻度は本書の内容をよく読み、守ってください。<br/>事故・けがの恐れがあります。</p>                                               |
|                                                                                                    | <p>使用中に痛みや不調を感じた場合、使用後肌に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止して、医師にご相談ください。<br/>けが・肌トラブルの原因になります。</p>                   |
|                                                                                                    | <p>本製品の使い始めは、肌の様子を見ながら使用してください。<br/>肌トラブルや体調不良の原因になります。</p>                                           |
| <br><b>禁止</b>   | <p>AC アダプターは高温・多湿の場所で使用や保管しないでください。<br/>絶縁劣化等により感電・火災・ショートの原因があります。</p>                               |
| <br><b>分解禁止</b> | <p>本製品は絶対に分解・修理・改造しないでください。<br/>火災・感電・けがの恐れがあります。</p>                                                 |

# 注意



本製品と他の美容機器との同時使用はしないでください。  
事故やけがの恐れがあります。

本体を落としたり、ぶつけたりして強い衝撃を与えないでください。  
故障・感電・発火・けがの恐れがあります。

本製品をベンジン・シンナー・アルコール等で拭いたり、殺菌剤を  
かけたりしないでください。  
ひび割れ・感電・発火の恐れがあります。

AC アダプターを用いた充電は必ず付属のものを使用してください。  
また、付属の AC アダプターで他の製品を充電しないでください。  
感電・発火の恐れがあります。

本製品は家庭用として使い、業務用として使わないでください。また、  
不特定多数が使う場所に放置・保管しないでください。  
連続使用による故障やけがの恐れがあります。

本製品が損傷したら使用しないでください。  
感電・発火・けがの恐れがあります。

本製品は家族や他人と共有して使用しないでください。  
感染症の恐れがあります。

本製品は必ず肌を濡らしてから使用してください。  
肌トラブルの原因になります。

本製品を除毛、脱毛した直後の箇所に使用しないでください。  
肌のトラブル・事故につながる恐れがあります。

スパチュラを肌以外の異物に触れさせないでください。  
製品の故障、肌のトラブル・事故になる恐れがあります。

浴室や湿気の多いところで保管しないでください。  
故障・ショートの恐れがあります。

イヤリングやネックレス等の貴金属やコンタクトレンズは、外してか  
ら使用してください。  
事故やけがの恐れがあります。

## 注意



肌荒れや皮膚表面に凹凸がある場合、または産毛やヒゲなどによって、まれに刺激を強く感じる場合があります。その際は、該当部位への使用を控えてください。

異常を感じたらただちに使用を中止し、医師にご相談ください。

スパチュラは肌の同一箇所に留めず肌に当てながらやさしく下から上へ動かしてください。

肌トラブルや体調不良の原因になります。

AC アダプタや充電ケーブルを外す際は根元を持ちゆっくり引き抜いてください。


火災・感電の恐れがあります。

本体は必ずキャップをしっかりとふせた状態で保管してください。

スパチュラ等が傷つき、歪んでしまうとミストが発生しなくなる恐れがあります。

# 内容物と各部名称


本体

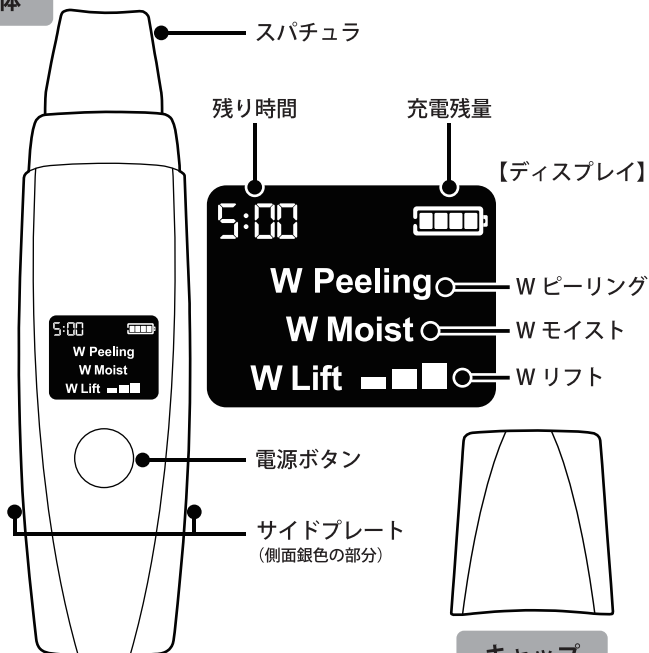

キャップ



充電台

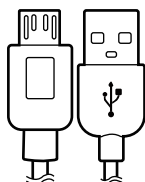

充電ケーブル



AC アダプタ



取扱説明書

# ご使用前にお読みください

## 危険

下記のような医用電気機器を使用中の方は、使用しないでください。  
誤作動を招く恐れがあります。

- ペースメーカー等の体内植込み型医用電気機器
- 心電計等の装着型医用電気機器

## 警告

次の方はかかりつけの医師に相談の上、ご使用ください。  
事故やけがの恐れがあります。

- アトピー性皮膚炎の方 ●アレルギー体質の方
- 特に肌が敏感な方 ●ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている方 ●心臓に障害のある方 ●急性（疼痛性）疾患の方
- 悪性腫瘍のある方 ●顔面神経痛の方 ●妊娠中の方 ●生理中の場合
- 有熱性疾患の方 ●血圧異常の方 ●感染性疾患のある方 ●結核症疾患の方
- 血友病疾患の方 ●歯の治療中の方 ●飲酒している場合や薬を服用中の方
- 疲労が著しい方 ●日焼けをしている方

下記部位には使用しないでください。


- 化粧品などで皮膚炎を起こしている部分 ●目や耳のまわり ●眼球及び上まぶた
- 傷口 ●顔面黒皮症の部分 ●口の中等粘膜の部分 ●ニキビや吹出物で炎症を起こしている部分 ●痛覚、知覚障害を起こしている部分 ●整形手術をした部分
- 皮膚の下に金属・プラスチック・シリコン等を埋め込んである部分
- カユミやほてり、物理的刺激などによる病的なシミのある部分

## ご使用前の注意


- 化粧を落とし、洗顔後にご使用ください。
- ご使用は週に 2 回までを目途にしてください。過度の使用は肌トラブルの原因になります。ご自身の肌の調子に合わせてご使用ください。
- 肌に異常を感じたらすぐに使用を中止し医師にご相談ください。トラブルや体調不良を起こす恐れがあります。
- ご使用の際には必ずスパチュラに触れた状態でご使用ください。
- 肌とスパチュラの角度は 30 度が最適です。肌を研磨するものではありません。
- お手持ちの水溶液ジェルなどもご使用可能ですが、スクラブ等の刺激の強いものは使用を避けてください。
- ご使用後は美容液や化粧水等で肌を整えてください。
- ご使用後は必ずお手入れをしてください。

## 防水性能について


本体は日本工業規格で規定された IPX5 の防水性能を有しています。  
濡れた手で触れたり、シャワーの水しぶきがかかっても問題ありません。  
しかし、完全防水ではありませんので水回りで使用する際は以下の点にご注意ください。  
また、付属品は防水仕様ではありませんのでご注意ください。

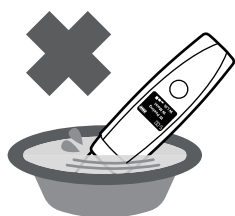

本体を洗面器や浴槽に  
浸水させない

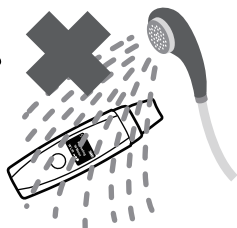

本体に直接強い水流を  
3分以上かけ続けない

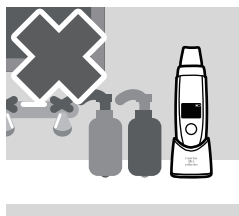

本体と付属品を湿度の高い  
場所で使用・保管しない

## スパチュラの取り扱いについて

スパチュラは超音波振動を伝えやすくするため繊細な作りになっています。  
製品の破損もしくは肌を痛める恐れがあるため、スパチュラは肌に強く押し当てず、  
肌を優しくなぞるように使用してください。

## 使用時間について

各モード 1 日 1 回まで、合計 10 分以内としてください。  
W ピーリングモードは全顔 5 分以内、W モイストモードは全顔 2 分以内、W リフトモードは全顔 3 分以内の使用目安をお守りください。  
スパチュラを同一箇所に留めず、ゆっくり動かして使用してください。  
使用時間目安内であっても肌に異常を感じた時はただちに使用を中止してください。

## 充電電池の廃棄について

本体内部にはリチウムイオン電池（充電電池）が内蔵されています。本製品を廃棄される際は廃棄される自治体のルールに従って廃棄してください。

# ご使用方法

## ご使用前の準備

1. 化粧を落とし、洗顔して素顔の状態にしてください。
2. 肌にニキビや吹き出物等がない状態を確認し、肌にしっかり水をつけてください。  
※乾燥した肌に使用するとピリピリと痛みを感じることがあります。  
※目の周りには使用しないでください。  
※入浴後や蒸しタオル等で肌が温まった状態が使用に最適です。  
※水の代わりに水溶性の化粧水や美容液などの化粧品をお使いいただけます。  
オイル系、スクラブ系の化粧品は使用しないでください。
3. 使用する際は必ずサイドプレート握った状態で使用してください。  
イオン導入・イオン導出・EMSを有効にするため握っている必要があります。

## 充電方法

1. 充電台に本体を差し込み充電ケーブルを付属のACアダプタもしくはパソコンなどに接続し、もう片方を充電台に接続します。



1. 充電ケーブルの接続

2. ディスプレイの充電残量が点灯し残量が増減していると充電中になります。

充電時のディスプレイは充電台にのせた後、約10秒間で消灯します。再び点灯させるには電源ボタンを押してください。



2. 充電中の充電残量表示

3. 充電残量が全て点灯すれば充電完了です。




3. 充電完了時の充電残量表示

## 電源のオン・オフ

ディスプレイに何も表示されていない状態で電源ボタンを押し続けると「ピッ」という音が鳴り、ディスプレイに充電残量等が表示されると電源オンになります。

再び電源ボタンを押し続けると「ピッ」という音が鳴り、ディスプレイの表示が消えると電源オフになります。

なお、各モードが動作していない状態（無操作）が約1分間続くと自動的に電源がオフになります。

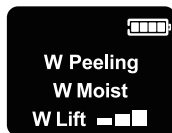


電源オン時



電源オフ時

### 3つのモード

電源がオンの状態で電源ボタンを押すと各モードに切り替わります。

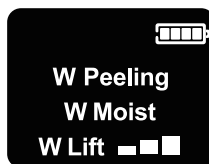

●W Peeling (W ピーリング)

古い角質や汚れを落とすモードです。


●W Moist (W モイスト)

美容成分を角質層へ浸透させるモードです。

●W Lift (W リフト)

肌を引き締めるモードです。強さは3段階から選べます。


各モードは下図のように電源ボタンを押すごとに切り替わります。( ) 内は各モードの使用制限時間です。

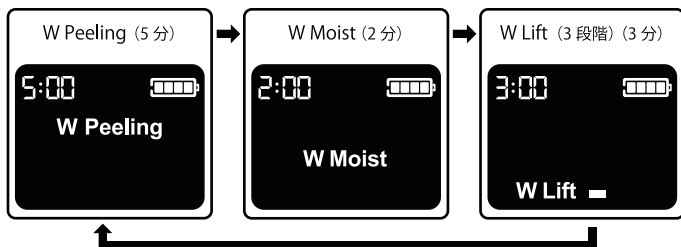

### スパチュラの肌への当て方

スパチュラはモードによって当て方が異なります。下図と同じように肌へ当ててください。いずれのモードも肌に対して30度程度傾けた状態で当ててください。

スパチュラは肌の同一箇所に留めず、肌に当てながらやさしく下から上へ動かしてください。肌トラブルや体調不良の原因になります。

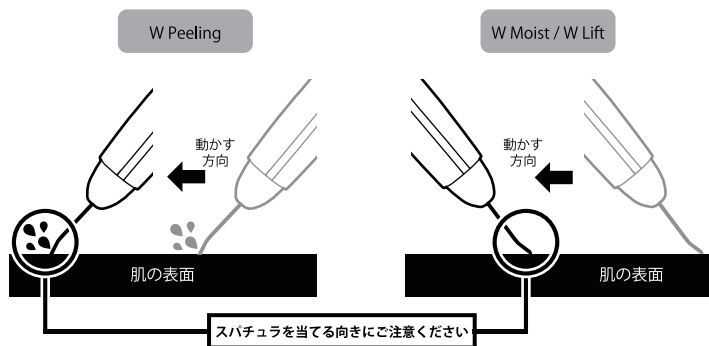



## 本体の動かし方

---

### ●W Peeling (W ピーリング)

ウォーターピーリングとイオン導出で汚れを落としていきます。

化粧をしっかりと落とし素顔の状態の水をしっかりとつけてから、肌に対して 30 度ほど傾けて当て、ゆっくり動かします。使用中に乾いてきたら、肌に水を足してください。

矢印の方向に動かしてください。目元・首元 (  ) は使用禁止部分



額



頬



口もと



鼻

### ●W Moist (W モイスト)

---

超音波振動とイオン導入で美容成分をより肌へ浸透させます (※角質層まで)。

美容液等を使用部分に塗布し、肌に対して 30 度ほど傾けて当て、ゆっくり動かします。

### ●W Lift (W リフト)

---

超音波振動と EMS により肌の筋肉に刺激を与えます。

水等を使用部分に塗布し、肌に対して 30 度ほど傾けて当て、ゆっくり動かします。

矢印の方向に動かしてください。目元・首元 (  ) は使用禁止部分

※W Moist・W Lift 共通



# お手入れ方法

## お手入れの準備

電源がオフになっていることと、本体が充電台から取り外されていることを確認し、注意事項をよくお読みになってからお手入れを始めてください。

## 本体・ヘッド・スパチュラ部分のお手入れ

乾いた柔らかい布で、本体、スパチュラ部分の汚れを拭き取ってください。

## 汚れがひどいとき

汚れがひどい時は、水で濡らした柔らかい布をよく絞って拭き取ってください。

## 保管方法

汚れを取った状態でスパチュラに傷などがつかないように、必ずキャップをつけて保管してください。



- 電源は必ずオフにしてください。誤って電源がオンの状態でお手入れをすると誤作動やショート、ケガなどの原因になります。
- シンナー、ベンジン、アルコール等で汚れを拭き取らないでください。本体の変色や変形の原因になります。

# よくある質問と答え

## Q1：1日に何回使用できますか？

---

A1：本製品の使用は各モード 1 日 1 回合計 10 分以内で、週 2 回までを目途に使用してください。使いすぎると肌へ負担がかかりダメージを与えてしまう場合があります。

## Q2：ピーリングをする箇所を水で濡らす理由は何ですか？

---

A2：超音波を直接肌に伝えるため水で濡らします。乾いた肌には絶対に使用しないでください。使用中に乾いてきたら、肌に水を足してください。

## Q3：肌にピリピリと痛みを感じることはありますか？

---

Q3：個人差はありますが電気刺激によるピリピリとした刺激を感じることがあります。肌に違和感を感じる場合は使用を中止し専門医にご相談ください。

## Q4：浴室で使用しても問題ありませんか？

---

Q4：生活防水仕様（IPX5）になっていますので浴室での使用は可能です。ただし、水中に落としたり、強い水流を 3 分以上かけ続けたり、浴槽の中で使用したりすると故障の原因になりますのでご注意ください。

## Q5：化粧の上から使用しても大丈夫ですか？

---

Q5：本製品は化粧落としではありませんので、化粧を落とし顔を水で濡らしてから使用してください。

## Q6：その他のトラブルの場合はどうすればよいですか？

---

Q6：肌に異常がある場合は、ただちに使用を中止し専門医にご相談ください。本製品に異常がある場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談窓口にご相談ください。

# 故障かな？と思ったら

電源ボタンを押しても電源がオンにならない、動作中に電源がオフになってしまう、スパチュラ部分が振動しない。

本体が十分に充電がされていない可能性がありますので、充電してください。充電しても改善されない場合はお客様相談窓口にお問い合わせください。

充電中に充電残量が表示されない（ディスプレイが点灯しない）。

本体が充電台に正しく差し込まれているか、充電ケーブルは接続されているか確認してください。満充電時はディスプレイが消灯します。

本体が異常に熱い。

使用目安を超えて連続使用した場合や、充電中は本体が熱くなる場合があります。異常に熱くなる場合は、お客様相談窓口にお問い合わせください。

ウォーターピーリングが弱く、水が飛ばない。

充電が不足している可能性がありますので、しっかり充電して角度を 30 度にして使用してください。

充電ができない。

充電台と充電ケーブルの接続を確認してください。正しく接続されていて充電できない場合は、お客様相談窓口お問い合わせください。

その他の異常がある。

販売店もしくはお客様相談窓口にお問い合わせください。

| 製品仕様  |                             |
|-------|-----------------------------|
| 定格電源  | AC100V ～ 240V 50/60Hz 0.2A  |
| 消費電力  | 5W                          |
| 充電時間  | 約 3 時間 ※使用環境によって充電時間は前後します。 |
| 本体サイズ | 約 180 × 45 × 25 mm          |
| 本体質量  | 約 146g（スタンドを含まず）            |
| 材質    | 本体：ABS・SUS304<br>充電台：ABS    |
| 製造国   | 中国                          |
| 付属品   | AC アダプタ、充電ケーブル、充電台          |

# アフターサービス

1. 保証期間はご購入日（商品到着日）から1年間です。  
この取扱説明書には保証書が付いています。保証書はご購入販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
2. 修理・交換を依頼される時  
※保証期間中の場合は保証書を用意し、お客様相談窓口にご連絡ください。  
保証書の記載内容にそって修理・交換いたします。  
保証期間外の場合、修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理します。
3. 補修用性能部品の保有期間  
当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としています。
4. ご使用中本体に異常を感じた時  
ただちにご使用を中止し、ご購入販売店に修理・交換をご依頼ください。  
お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です。）

## 修理・交換について

### 《無償修理規定》

ご購入日（商品到着日）から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、本書記載内容に基づき、無償修理します。商品と本保証書をご持参・ご提示の上、ご購入販売店にご連絡ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有償修理になります。
  - 1-1. 使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
  - 1-2. お買い上げ後の輸送等で落下、衝撃による故障または損傷。
  - 1-3. 火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
  - 1-4. 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
  - 1-5. 本書の提示がない場合。
  - 1-6. 本書にお買い上げ日、お客様ご氏名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご贈答品などで本書に記入してある内容の修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
4. 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

# 保証規定

- ・この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理・交換をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- ・保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。
- ・当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

1. 保証期間内に取扱説明書に従い正常な状態で使用し故障した場合は、本規定に基づき無償で修理します。ただし、消耗品、付属品、メンテナンス費用などは除きます。
2. 保証期間内でも以下のような場合は有償での修理・交換になります。
  - 1) 保証書のご提示がない場合。
  - 2) 保証書のお買い上げ日、お客様ご氏名、販売店名のない場合やご購入情報が分かる書類のご提示がない場合、または字句を書き換えられた場合。
  - 3) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
  - 4) 火災、地震、水害、落雷、公害、異常電圧、その他天変地異、戦争や紛争等による故障及び損傷。
  - 5) 使用上の誤り、事故、乱用、異常電圧及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - 6) 注意事項を遵守しなかったことによる故障。
  - 7) お客様の不注意や故意による故障。
3. 修理を依頼される場合はお買い上げの販売店ないし、保証書と領収書などで購入日が分かる書類を添えてご依頼をお願いします。やむを得ず送付される場合は送料のご負担をお願いします。
4. 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本保証書は個人の使用においてのみ有効です。業務用に使用した場合は本保証書の対象外になります。

| 保 証 書       |                                                                                     | 保証期間 | お買い上げ日（商品到着日）から 1 年間 |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--|
| お<br>客<br>様 | ご氏名：                                                                                |      |                      |  |
|             | ご住所：(〒                      )                                                       |      |                      |  |
|             | お電話番号：                                                                              |      |                      |  |
|             | お買い上げ（商品到着日）日：                      年                      月                      日 |      |                      |  |
| 販売店名：       |                                                                                     |      |                      |  |

anynext 株式会社 お客様ご相談窓口

0120-093-063 ※平日 9 時～ 21 時（土日祝も受付。年末年始、GW は除く）

〒306-0042 茨城県古河市三和 176-10